

Mesa de cirugía





RX

Radio traslúcida
para toma de RX con arco en C.

NOT 5600

SK (F)-07

- Para cirugías en general y aplicaciones específicas.
- Sistema Electrohidráulico integrado.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Radio traslúcido para toma de RX.
- Proporciona movimiento longitudinal para la toma de RX
- Mecanismo integrado de puente riñón.
- Hasta 100 accionamientos con batería interna (opcional)
- Kit de ortopedia (opcional).
- Set de parto/urología (opcional).
- Kit de accesorios mesas BenQ (opcional)
- Rango de altura de 650 a 900mm (opcional, NOT 5600SKNB)

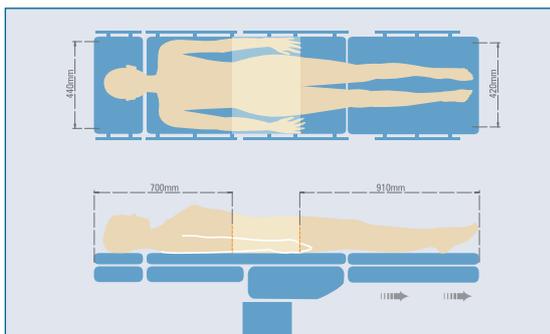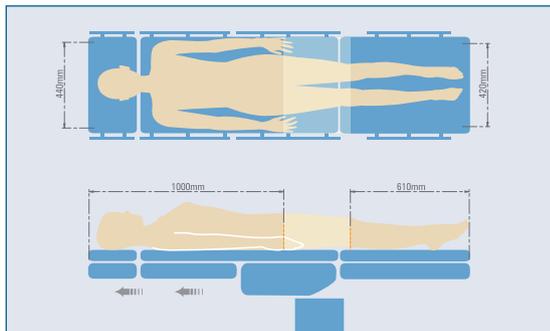

Las mesas quirúrgicas están diseñadas para lograr funciones de usos múltiples, eléctricamente accionadas e hidráulicamente operada a través de un control manual, control de pie (opcional), o control auxiliar (opcional). El marco de la mesa está hecha de aluminio fundido con base resistente al desgaste y las cubiertas de columna son de acero inoxidable para proporcionar resistente a impactos, roturas y desinfectantes.

Radio traslúcida

Permite la toma de rayos x con Arco en C en diferentes ángulos de exposición.

Control de Mano

Alcanza las posiciones deseadas de manera suave y precisa

Columna Única

Se puede colocar la mesa en la posición deseada y esto puede alcanzarse efectivamente.

Soporte en forma de T

Facilita el acceso del equipo quirúrgico y la estabilidad de la mesa.

Soporte en forma de T

Facilita el acceso del equipo quirúrgico y la estabilidad de la mesa.

Piñeras divididas y desmontables

Permite la colocación horizontal o vertical ajustable de las piñeras

Mesa con desplazamiento longitudinal

Desplazamiento longitudinal de 300 mm y radiotraslúcida, facilitando el acceso del Arco en C, teniendo cobertura completa de imágenes sin mover al paciente. (5600 SKF series)

Mecanismo de bloqueo central de piso

Fija la mesa Fácil y firme en el lugar



La mesa de operaciones NOT 5600 SK(F) está diseñada para posicionar con eficacia a los pacientes, facilitar el acceso y control de cualquiera de los equipos quirúrgicos o Arco en C y garantizar la seguridad y comodidad del paciente. Para satisfacer las necesidades de productividad, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento, fiabilidad a largo plazo y Durabilidad, estos nuevos modelos se crean para cumplir con esta misión en la más atractiva relación entre precio-rendimiento.

APLICACIONES

Ideal para cirugías generales y aplicaciones específicas.

*Alguna de estas aplicaciones requieren de accesorios opcionales.

CIRUGÍA DE VEJIGA , LITOTOMÍA



CARDIOVASCULAR



CIRUGÍA PLÁSTICA / OFTALMOLOGÍA Y FACIAL



CIRUGÍA RECTAL



CIRUGÍA E.N.T



CIRUGÍA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA



CIRUGÍA ESPINAL



NEUROCIRUGÍA / CRANEOTOMIA



CIRUGÍA DE ARTROSCOPIA DE RODILLA



UROLOGÍA



CIRUGÍA DE ARTROSCOPIA / HOMBRO TOTAL



Accesorios Que incluye

- 1 Cabecera: Se puede subir, bajar y quitar manualmente.
- 1 Espaldar: Se puede subir y bajar electro-hidráulica.
- 1 Puente Riñón: Se puede subir y bajar manualmente.
- 2 Pierneras: Se puede subir, bajar, horizontal.

Colocar y retirar manualmente.

2 Braceras: Diseño plegable y desmontable.

- 1 Control de mano
- 1 Juego de cojines

Control de pie (Opcional)

