



SKK-M

Carro de paro



Características Principales.

- ▶ **Dimensiones:** Ancho: 750 x 520 x Alto: 960 mm
- ▶ **Ruedas:** 100 mm
- ▶ **Material:** ABS y materiales antibacterianos de fácil limpieza. Acero inoxidable para el atril y soporte desfibrilador.



SAIKANG/Medical



SKK-M

Carro de paro

Características Técnicas.


Soporte de una sola pieza.

El soporte de una sola pieza proporciona una protección más completa; el mango totalmente protegido hace que sea más cómodo de sujetarse; la forma de agarre elevada hace que el manejo de la mesa lateral sea más cómodo.



Agarradera Funcional.

Agarradera decorativa biselada en el exterior, para una mayor comodidad de funcionamiento.

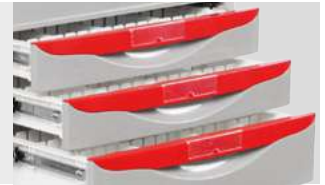

Estructura Resistente.

Ruedas ensambladas en la misma línea vertical con cuatro columnas para brindar una mayor estabilidad, incluso cuando los cajones interiores se encuentren abiertos llenos de medicamentos/herramientas.



Cajón.

Cajones mas grandes y más profundos!



Fuente de Alimentación.

La toma de corriente es móvil y desmontable, fácil de usar, ubicada encima del tablero de RCP para facilitar el uso de cilindros de oxígeno.



Soporte para Cilindro de Oxígeno.

Incluye soporte para cilindro de oxígeno retráctil insertado, con cinturones de fijación en el carro para brindar un mayor ahorro de espacio.



Atril de Infusión.

Atril insertado en la columna del cuerpo principal.



Divisiones de Cajón.

Divisiones de cajón tipo tarjeta desde la parte inferior para una mejor clasificación de insumos y mayor facilidad de limpieza.



Desfibrilador.

La superficie de la placa está hecha de material ABS. La posición del atril y de la placa para el desfibrilador se pueden intercambiar para facilitar su uso.



Caneca de Desechos.

Caneca de desechos verde y amarillo para una mejor disposición de los mismos.

