



Mesa Quirúrgica

NOVEL 330T Mesa Quirúrgica



RX

Radio traslúcida
para toma de RX con arco en C.

- ▶ Sistema hidráulico de elevación.
- ▶ Mesa Totalmente manual.
- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Para cirugías en general.
- ▶ Fácil Operación.



Mesa Quirúrgica

Especificaciones Técnicas

SERIE 330T








La serie de mesas quirúrgicas móviles **330T** son totalmente manuales operadas para la operación fácil y eficaz con el fin de facilitar el acceso a cualquiera de los equipos quirúrgicos o el arco en-C y garantizar la seguridad y comodidad del paciente.

Las mesas quirúrgicas son de accionamiento hidráulico de elevación y mecanismo de engranaje que funciona en todas las articulaciones a través del mando de control de posición de cabecera.

Esto evita perder tiempo cuando se debe ajustar la mesa en cualquier procedimiento quirúrgico.

Especificaciones:

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	1.960 mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales)	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo)	710-950 mm
Cabecera (arriba/abajo)	60o/90o
Espaldar (arriba/abajo)	90o/5o
Pierneras (arriba/abajo)	0o/90o
Pierneras (posición horizontal)	0o-90o
Trendelenburg / trendelenburg inverso	25o / 25o
Inclinación Lateral (izq/der)	20o / 20o
Flexion/deflexion	185o / 90o
Máximo peso de paciente	120 kg

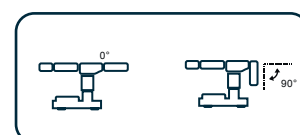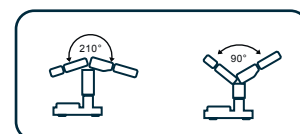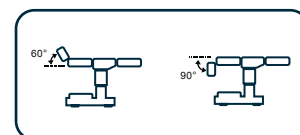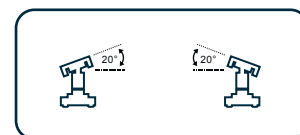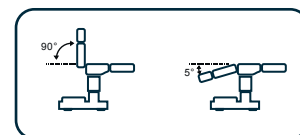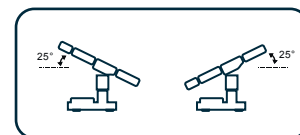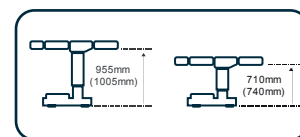

Manivela Izquierda:

Control de placa espaldar arriba / abajo y flexión / deflexión.

Bloqueo de posicionamiento Vertical y horizontal

Para pierneras.

Control de Rotación de la Mesa

Provee de rotación 360° para los procedimientos quirúrgicos ideal para facilitar el acceso y el espacio máximo para cualquiera de los equipos quirúrgicos o de la unidad de rayos X arco en C.

Manivela derecha:

Control de Trendelenburg / Trendelenburg inverso e inclinación izquierda / derecha.

Bloqueo Central Mecanismo de Piso:

Fácil, permite fijar la mesa en su lugar.

Grandes Ruedas giratorias:

Proporcionar una excelente movilidad.

Bomba de aceite pedal plegable:

Control de elevación y descenso de mesa.