



VIDEOCOLPOSCOPIO
C6A

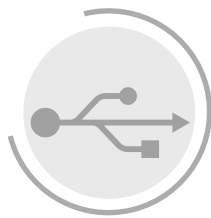

Enchufe
USB

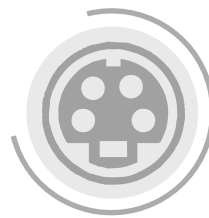

S-Video

Videocolposcopio

Características funcionales


Videocolposcopio C6A

- ▶ El sistema de iluminación LED que reproduce una vista original del tejido.
- ▶ El sistema de enfoque automático rápido y avanzado garantiza una imagen clara.
- ▶ Control remoto de captura y diseño de teclado fácil de usar para una fácil operación.
- ▶ El filtro verde electrónico mejora la visualización de imágenes vasculares sin comprometer la iluminación.
- ▶ Potente software de visualización de imágenes y gestión de datos.
- ▶ Configuración Estándar; cámara, soporte, bandeja, NO incluye pantalla .

Con su sistema de iluminación LED brillante, cámara HD y filtro electrónico verde, el colposcopio de video C6A realiza una visualización en pantalla completa del examen cervical preciso, ofreciendo información crucial y precisa para la toma de decisiones clínicas al ginecólogo.

Análisis CTG

El sistema de evaluación R-way™ revela la variación del "color" en el cuello uterino para interpretar el desempeño de las enfermedades del cuello uterino.

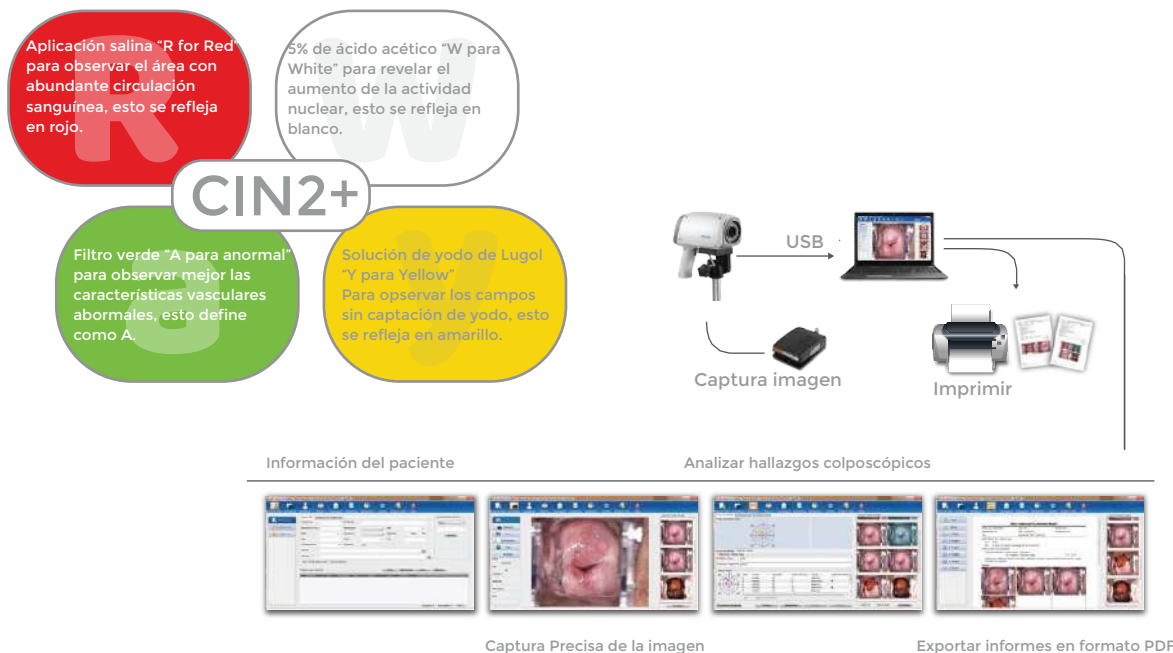

Características funcionales

Videocolposcopio C6A

- ▶ Rendimiento esencial
- ▶ Ampliación: 1 ~ 50X
- ▶ Distancia de operación: 200 mm-300 mm
- ▶ Iluminación: ≥ 2.500 lx

Campo de visualización:

- ▶ 3X: $\geq \varnothing 100$ mm (275 mm) $\circ \geq 20,5^\circ$
- ▶ 18X: $\geq \varnothing 15$ mm (275 mm) $\circ \geq 3^\circ$

Otras especificaciones de rendimiento

- ▶ Resolución: 2.000.000 píxeles
- ▶ Modo de enfoque: Manual, Auto
- ▶ Señal de salida: HDMI
- ▶ Resolución del sistema: ≥ 1000 TVL
- ▶ Resolución del espacio: ≥ 14 lp/mm
- ▶ Distorsión de imagen geométrica: $\leq 3\%$
- ▶ Fuente de luz de la cámara: Luz LED blanca de grupo de bucle
- ▶ Balance de blancos: Automático, manual

Modo de adquisición de imagen:

- ▶ Luz blanca (3 niveles) Filtro electrónico verde (3 niveles)
- ▶ SNR: ≥ 50 dB

Profundidad del campo:

- ▶ 6X: ≥ 120 mm
- ▶ 18X: ≥ 5 mm