



SAIKANG®



Carro de paro SKK-M



Tabla plástica para
masajes cardiorrespiratorios



5 gavetas con divisiones
interiores para el
almacenamiento de
fármacos



Ruedas giratorias en goma
con **freno en 2 ruedas**

- ▶ Portasuero ajustable en altura
- ▶ Bandeja superior giratoria (360°) para insumos y equipos
- ▶ Bandeja lateral extraíble
- ▶ Soporte lateral para contenedor de residuos
- ▶ Divisiones internas (pestañas) para mejor organización
- ▶ Protector contra golpes redondeado alrededor del carro
- ▶ Estructura resistente de fácil limpieza

Áreas de uso




HOSPITALIZACIÓN



URGENCIAS



SALA DE
CIRUGÍA

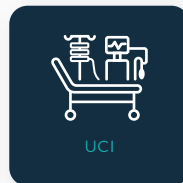

UCI

Características Principales

Carro de paro SKK-M

- Dimensiones: Ancho: 750 x 520 x Alto: 960 mm
- Ruedas: 100 mm
- Material: ABS y materiales antibacterianos de fácil limpieza. Acero inoxidable para el atril y soporte desfibrilador.



Soporte de una sola pieza.

El soporte de una sola pieza proporciona una protección más completa; el mango totalmente protegido hace que sea más cómodo de sujetarse; la forma de agarre elevada hace que el manejo de la mesa lateral sea más cómodo.



Estructura Resistente.

Ruedas ensambladas en la misma línea vertical con cuatro columnas para brindar una mayor estabilidad, incluso cuando los cajones interiores se encuentren abiertos llenos de medicamentos/herramientas.



Fuente de Alimentación.

La toma de corriente es móvil y desmontable, fácil de usar, ubicada encima del tablero de RCP para facilitar el uso de cilindros de oxígeno.



Atril de Infusión.

Atril insertado en la columna del cuerpo principal.

Características Principales

Carro de paro SKK-M

www.novamedicasas.com

Carro de paro
Este catálogo está diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©



Desfibrilador.

La superficie de la placa está hecha de material ABS. La posición del atril y de la placa para el desfibrilador se pueden intercambiar para facilitar su uso.



Agarradera Funcional.

Agarradera decorativa biselada en el exterior, para una mayor comodidad de funcionamiento.



Cajón.

Cajones mas grandes y más profundos!



Soporte para Cilindro de Oxígeno.

Incluye soporte para cilindro de oxígeno retráctil insertado, con cinturones de fijación en el carro para brindar un mayor ahorro de espacio.

Características Principales

Carro de paro SKK-M



Divisiones de Cajón.

Divisiones de cajón tipo tarjeta desde la parte inferior para una mejor clasificación de insumos y mayor facilidad de limpieza.



Caneca de Desechos.

Caneca de desechos verde y amarillo para una mejor disposición de los mismos.



V-001