



Unidad portátil de absorción de flema

SXT-5A

Características



Almacenamiento
de 1000mL



Velocidad de flujo
20L/min



Protección contra
desbordamiento

- ▶ Alto vacío (flujo), buen rendimiento
- ▶ Diseño compacto, portátil y liviano (4 kg)
- ▶ Filtro de aire para protección interna de la bomba
- ▶ Bomba de pistón libre de aceite
- ▶ Flujo de succión ≥ 20 L/min con vacío ajustable hasta 600 mmHg

Áreas de uso




URGENCIAS



HOSPITALIZACIÓN



AMBULANCIA

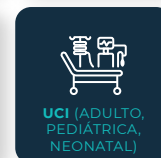

UCI (ADULTO,
PEDIÁTRICA,
NEONATAL)

Unidad portátil de absorción de flema

SXT-5A



Compacta, eficiente y confiable: El SXT-5A es una solución práctica para la aspiración de secreciones en cualquier entorno.

La unidad portátil de absorción de flema **SXT-5A** ofrece un alto rendimiento en un **diseño liviano y fácil de transportar**. Su bomba de pistón libre de aceite garantiza una succión estable sin necesidad de mantenimiento. El dispositivo incorpora un sistema de **protección contra desbordamiento** que evita la contaminación de la tubería interna, asegurando una operación higiénica y segura.

Gracias a su flujo de succión de ≥ 20 litros por minuto y su vacío máximo de 600 mmHg, la SXT-5A es adecuada para **procedimientos médicos básicos y emergencias**. Su bajo nivel de ruido (≤ 60 dB), su recipiente de 1000 ml en policarbonato y sus accesorios incluidos hacen de esta unidad una **herramienta confiable y lista para usarse en cualquier momento**.

Unidad portátil de absorción de flema SXT-5A

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:

- Dimensiones: 210 x 140 x 300mm
- Peso: 4 Kg

Especificaciones de seguridad:

- Clase de protección y grado de protección: Clase I y tipo B

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:

- Temperatura: 5 ~ 40 °C
- Humedad relativa: ≤ 80%
- Presión atmosférica: 860 -1060 hPa.

Almacenamiento:

- Temperatura: -40 ~ 55 °C
- Humedad relativa: ≤ 95%
- Presión atmosférica: 500 ~ 1060 hPa

Especificaciones de alimentación:

- Voltaje de entrada: ~110 V
- Frecuencia de entrada: 60Hz.
- Potencia: 250VA

Especificaciones de funcionamiento:

- Máximo Vacío: ≥0.08MPa (600mmHg)
- Rango de Vacío ajustable: 0.02 MPa (150 mmHg) ~Máx. vacío
- Rango de Flujo: ≥ 20L/min
- Ruido: ≤60dB(A)
- Recipiente de almacenamiento: 1000ml, material plástico transparente (Policarbonato), desinfección del material del recipiente: Sumersión en solución desinfectante.
- Ciclo de trabajo: La unidad deberá trabajar continuamente durante 30 minutos con carga intermitente.

Accesorios incluidos:

- Recipiente de secreciones
- Manguera de succión
- Filtro de aire
- Manual de usuario
- Filtro hidrofóbico

Accesorios Opcionales:

- Recipiente de secreciones Adicional



Preguntas Frecuentes.

1. ¿El aspirador SXT-5A es portátil?

Sí. Su diseño compacto y peso ligero (4kg) lo hacen ideal para transporte y uso en diversos entornos clínicos, incluidos el hogar y la ambulancia.

2. ¿Qué capacidad tiene el recipiente de secreciones?

El equipo incluye un recipiente de policarbonato con capacidad de 1000 ml, resistente y fácil de limpiar, con protección contra desbordamiento.

3. ¿Es necesario lubricar la bomba?

No. El equipo utiliza una bomba de pistón libre de aceite, lo que elimina la necesidad de mantenimiento por lubricación y asegura un funcionamiento limpio y eficiente.

4. ¿Qué flujo de succión ofrece?

El flujo de succión es igual o superior a 20 litros por minuto, lo que garantiza una aspiración rápida y efectiva de secreciones.

¡No te pierdas nada de lo que hacemos!

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas



#somostualiado