



## Mesa Quirúrgica **NOT 5600SKF**



### Características



Batería recargable  
integrada



Alta capacidad de carga:  
273 kg de carga de trabajo



Control de mano  
alámbrico

- Radio traslúcido para toma de RX.
- Rango de altura de 650 a 900mm (opcional, NOT 5600SN)
- Estructura fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad.
- Inclinación lateral 21° por lado para facilitar cirugías MIS y endoscópicas.
- Sistema electrohidráulico integrado para movimientos precisos y silenciosos

### Áreas de uso



SALAS DE CIRUGÍA

# MESA QUIRÚRGICA NOT 5600SKF



La NOT-5600SKF es una **solución versátil y robusta para salas de cirugía** de cualquier nivel de complejidad.

Su **sistema electrohidráulico integrado** con **batería recargable incorporada** y su **superficie radiotranslúcida** permiten un posicionamiento preciso, seguro y continuo del paciente, optimizando los tiempos quirúrgicos y facilitando la toma de imágenes intraoperatorias, incluso ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.


Gracias a su rango completo de movimientos (**Trendelenburg, inclinación lateral, flexión y extensión**) y a la **opción de puente renal integrado**, la mesa se adapta a procedimientos generales y especializados.

Su diseño en acero inoxidable y su fácil limpieza aseguran **durabilidad y cumplimiento con los estándares de habilitación**, garantizando un entorno seguro y confiable para el paciente y el equipo quirúrgico.

## Mesa Quirúrgica NOT 5600SKF

### Especificaciones de funcionamiento

▶ Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	▶ 1.950 mm
▶ Longitud de la mesa (sin cabecera)	▶ 1.690 mm
▶ Ancho de la mesa (con rieles laterales)	▶ 552 mm
▶ Ancho de la mesa (sin rieles laterales)	▶ 500 mm
▶ Altura de la mesa (arriba/abajo)	▶ 760 -1070 mm 650 – 900 mm (Opcional NOT 5600NS)
▶ Desplazamiento longitudinal	▶ 300 mm
▶ Cabecera (arriba/abajo)	▶ 60°/ -90°
▶ Espaldar (arriba/abajo)	▶ 80°/ -40°
▶ Pierneras (arriba/abajo)	▶ 15°-90°
▶ Pierneras (posición horizontal)	▶ 0° - 180°
▶ Trendelenburg / trendelenburg inverso	▶ 26°/26°
▶ Inclinación Lateral (izq/der)	▶ 21°/21°
▶ Flexión/deflexión	▶ 220°/100°
▶ Máximo peso de paciente Carga estática* / carga de trabajo (kg)	▶ 360kg/273 kg
▶ Elevación de puente riñón	▶ 121 mm
▶ Peso de la mesa	▶ 259 kg

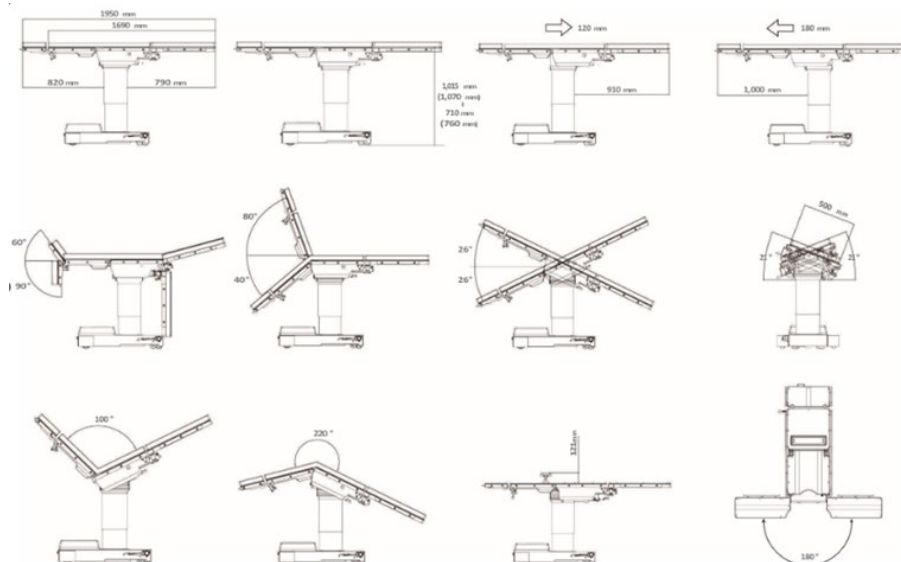

### Especificaciones ambientales

#### Funcionamiento:

- ▶ Temperatura: 10° ~ 40°C
- ▶ Humedad relativa: 30% ~ 75%
- ▶ Presión atmosférica: 70 KPa ~ 106 KPa

#### Almacenamiento:

- ▶ Temperatura: -20° a 50°C
- ▶ Humedad relativa: 20 % a 80%
- ▶ Presión atmosférica: 50 KPa a 106 KPa

#### Especificaciones de alimentación

- ▶ Voltaje: 100-240V
- ▶ Frecuencia: 50Hz/60Hz
- ▶ Batería: 12V, 12.0 Ah
- ▶ Ciclo de trabajo: 65/70 Accionamientos

## Características Principales

www.novamedicasas.com

Este catálogo está diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

### Mesa Quirúrgica **NOT 5600SKF**

#### Especificaciones físicas



##### Puente renal integrado

El puente renal integrado permite la operación fuera del campo estéril, a la izquierda o a la derecha del cabezal, lo que ayuda a evitar la interferencia con los procedimientos quirúrgicos y la contaminación del campo estéril. El puente renal también es translúcido a los rayos X. (Solo el modelo K cuenta con esta función)

#### 21° de inclinación lateral



Los grados de inclinación lateral mejoran aún más el posicionamiento del paciente durante la cirugía MIS y endoscópica.

#### Aplicaciones

Ideal para cirugías generales y aplicaciones específicas

Cirugía de tórax, riñón y vesícula biliar



Cirugía de obstetricia y ginecología, urología y cistoscopia



Cirugía lumbar



Cirugía de vejiga por litotomía



Cirugía artroscópica de rodilla



Cardiovascular



Neurocirugía



Cirugía Oftalmológica y Facial / Plástica



Cirugía total de hombro/artroscopia





## Características Principales

www.novamedicasas.com

Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

### Mesa Quirúrgica **NOT 5600SKF**

#### Accesorios incluidos:

Braceras cantidad: 2  
Pieceros cantidad: 2  
Juego de cojines

#### Accesorios opcionales:

##### FUNCIONES

E ——— Nivelación automática  
A ——— Control auxiliar



#### Dispositivo de Tracción Ortopédica Telescópica Integrada



Esta unidad está equipada con una articulación doble y brazos de tracción telescópicos que permiten la rotación pélvica para lograr los requisitos de posicionamiento más exigentes. (Solo el modelo F cuenta con esta función).

## Preguntas Frecuentes.

### 1. ¿La mesa es adecuada para todo tipo de cirugía?

Sí. La NOT-5600SKF está diseñada para cirugías generales y especializadas, incluyendo ginecología, urología, ortopedia, neurocirugía, cardiovascular, plástica y procedimientos MIS.

### 2. ¿La mesa es radiotranslúcida y permite toma de imágenes durante la cirugía?

Sí. La superficie de la mesa es radiotranslúcida y permite desplazamiento longitudinal de 300 mm para facilitar la toma de imágenes intraoperatorias.

### 3. ¿Qué peso de paciente soporta la mesa?

Soporta 360 kg de carga estática y 273 kg de carga de trabajo, brindando seguridad en todo tipo de procedimientos quirúrgicos.

### 4. ¿Qué ajustes de posición permite?

Ofrece Trendelenburg e inversión, inclinación lateral  $\pm 21^\circ$ , flexión/deflexión, movimientos de cabecera y espaldar.

**¡No te pierdas nada de lo que hacemos!**

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas



#somostualiado